

KitPipeP

KOO MEDICAL



Ora con il nuovo
manometro ECO



Una **semplice**
pratica per un
grande
beneficio

KitPipeP

Una gamma completa di kit e accessori, offre la soluzione ad ogni esigenza, sia essa ospedaliera o domiciliare, adattandosi alle necessità terapeutiche. La gamma ora **comprende 8 diversi kit**, le taglie delle maschere permettono l'uso con i pazienti più piccoli fino agli adulti. I normali metodi di pulizia, disinfezione e sterilizzazione **assicurano la prevenzione delle infezioni.**



Il **Kit PipeP** realizzato in **policarbonato** è completo di **9 resistenze di diversa intensità con codice colore** per una più facile identificazione. Le **due valvole in silicone unidirezionali**, poste all'interno del corpo della valvola, **regolano il passaggio del flusso inspiratorio ed espiratorio**, evitando alterazioni della pressione durante l'uso. Una freccia presente sul corpo della valvola **indica la direzione del flusso** durante l'atto respiratorio.

Il **boccaglio della valvola**, permette un uso diretto, oppure può essere raccordato con **maschere di diverse grandezze** (con connettore avente diametro da 22 mm esterno o 15 mm interno). Le **cannule tracheostomiche** con diametro 15 mm esterno possono essere raccordate direttamente.



Tutti i modelli **Home care (KM-803HC, HCx)** ora hanno incluso il **nuovo manometro ECO** per il **controllo della PEP da 0 a 20 cmH₂O.**

Indicazioni:

- **rimozione delle secrezioni nelle vie aeree**,
- **ripristino di valori normali dei volumi respiratori** in caso di alterazioni,
- **riabilitazione polmonare** in seguito a patologia, traumi, o nel post-chirurgico.

Kit HomeCare



Kit composto da:

- Valvola
- 9 Resistenze
- Interfaccia
- Connettore a T con tubo di collegamento e manometro ECO
- Borsa trasporto

Kit Ospedaliero



Kit composto da:

- Valvola
- 9 Resistenze
- Connettore a T con tubo di collegamento manometro (manometro non incluso)

Gamma resistenze




KM-803D	KM-803W	KM-803Y	KM-803B	KM-803G	KM-803O	KM-803M	KM-803C	KM-803P
1.5 mm	2.0 mm	2.5 mm	3.0 mm	3.5 mm	4.0 mm	4.5 mm	5.0 mm	6.0 mm
Nero	Bianco	Giallo	Blu	Verde	Arancione	Rosa	Rosso	Viola


Codice	Descrizione	Pezzi per box
KM-803	Kit composto da: valvola, 9 resistenze e connettore a T con tubo per il collegamento con il manometro (manometro non incluso).	1 kit
KM-803HC	Kit composto da: valvola, 9 resistenze, boccaglio, connettore a T con tubo per il collegamento , manometro ECO e borsa trasporto.	1 kit
KM-803HCI	Kit composto da: valvola, 9 resistenze, maschera neonato 0 in silicone, connettore a T con tubo per il collegamento , manometro ECO e borsa trasporto.	1 kit
KM-803HCO	Kit composto da: valvola, 9 resistenze, maschera neonato 1 in silicone, connettore a T con tubo per il collegamento, manometro ECO e borsa trasporto.	1 kit
KM-803HCN	Kit composto da: valvola, 9 resistenze, maschera infante in silicone, connettore a T con tubo per il collegamento , manometro ECO e borsa trasporto.	1 kit
KM-803HCP	Kit composto da: valvola, 9 resistenze, maschera pediatrica in silicone, connettore a T con tubo per il collegamento, manometro ECO e borsa trasporto.	1 kit
KM-803HCA	Kit composto da: valvola, 9 resistenze, maschera adulto in silicone, connettore a T con tubo per il collegamento , manometro ECO e borsa trasporto.	1 kit
KM-803HCL	Kit composto da: valvola, 9 resistenze, maschera adulto extra-large in silicone, connettore a T con tubo per il collegamento , manometro ECO e borsa trasporto.	1 kit
KM-1034	Maschera PANDA in PVC, taglia infante 0-3 anni senza valvola	50 pz
KM-1033	Maschera PANDA in PVC, taglia pediatrica 3-6 anni senza valvola	50 pz
KM-8045	Maschera in silicone taglia neonato 0	100 pz
KM-8044	Maschera in silicone taglia neonato 1	100 pz
KM-8043	Maschera in silicone taglia infante	100 pz
KM-8042	Maschera in silicone taglia pediatrica	100 pz
KM-8041	Maschera in silicone taglia adulto	100 pz
KM-8040	Maschera in silicone taglia extra -large	100 pz
KM-803D	Set di resistenze da 1,5 mm di diametro, colore nero	10 pz
KM-803W	Set di resistenze da 2,0 mm di diametro, colore bianco	10 pz
KM-803Y	Set di resistenze da 2,5 mm di diametro, colore giallo	10 pz
KM-803B	Set di resistenze da 3,0 mm di diametro, colore blu	10 pz
KM-803G	Set di resistenze da 3,5 mm di diametro, colore verde	10 pz
KM-803O	Set di resistenze da 4,0 mm di diametro, colore arancione	10 pz
KM-803M	Set di resistenze da 4,5 mm di diametro, colore rosa	10 pz
KM-803C	Set di resistenze da 5,0 mm di diametro, colore rosso	10 pz
KM-803P	Set di resistenze da 6,0 mm di diametro, colore viola	10 pz
KM-803K	Set di resistenze da 1,5 a 6,0 mm di diametro, colore assortiti	9 pz
KM-8032	Connettore a "T" con tubo da 50 cm e manometro ECO	50 pz
KM-8035	Connettore a "T" con tubo da 50 cm	50 pz
KM-8051	Boccaglio	50 pz
57301537	Manometro da - 50 +50 cmH ₂ O	1 pz
57303499	Manometro da - 30 +30 cmH ₂ O	1 pz

Istruzioni per il montaggio


Montaggio del Kit

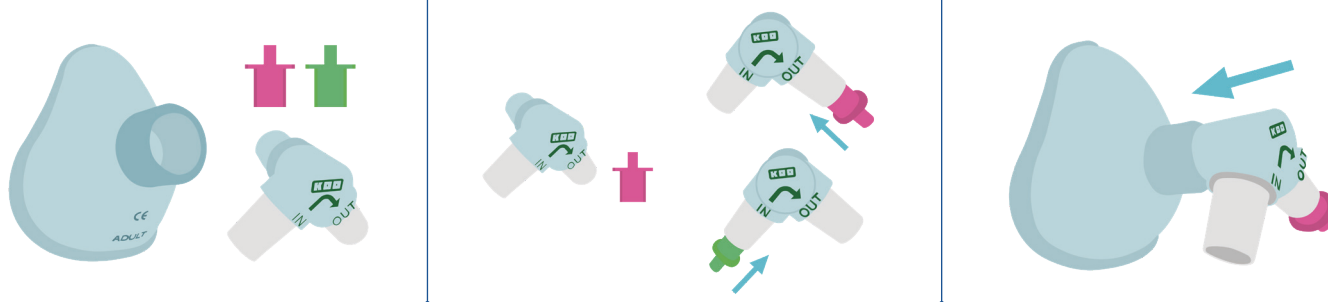

Montaggio del Kit con manometro standard

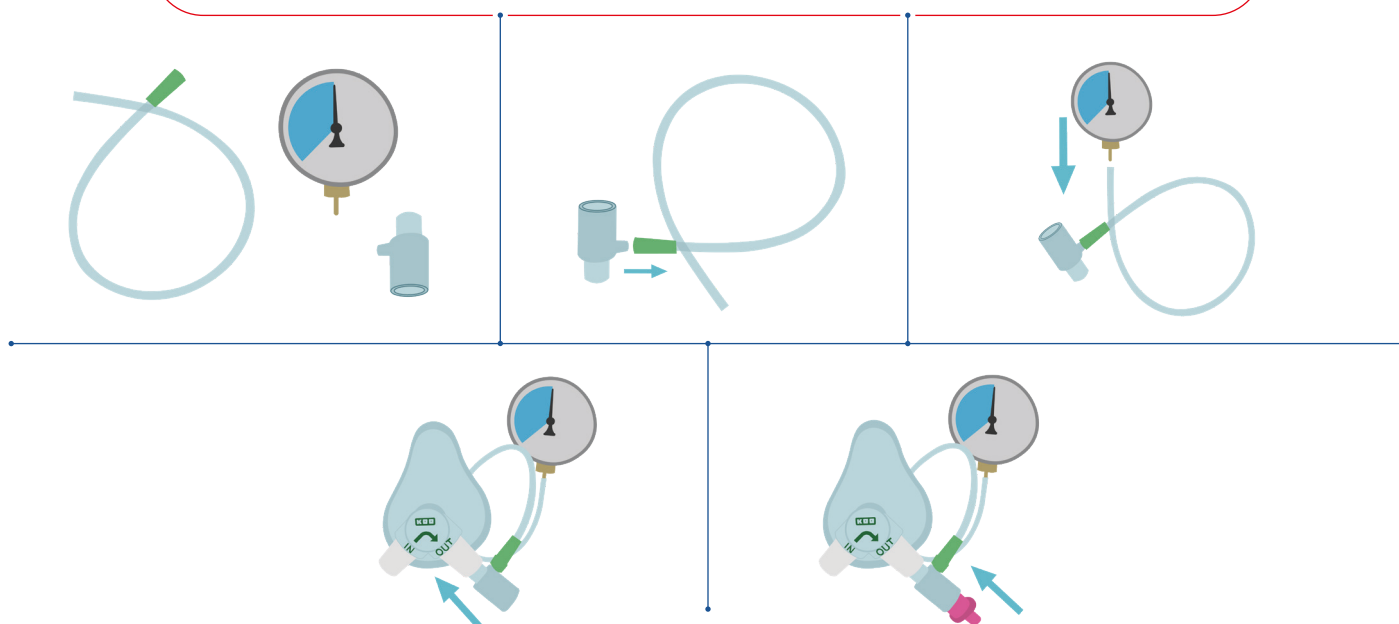

Montaggio del Kit con manometro ECO

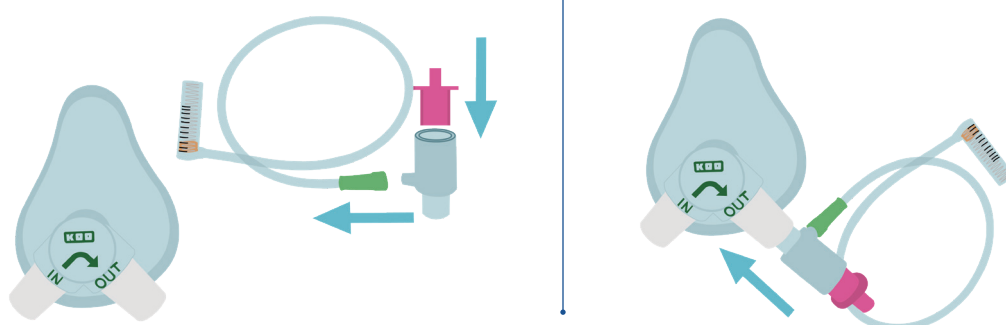

KOO MEDICAL



www.koomedical.com

KOO (SHANGHAI) Industries Co.Ltd. 100 Zhongde Road, Xiaokunshan Town. Songjiang Shanghai 201614 China

Distribuito in EMEA Koo da Europe srl viale delle Industrie 5 20044 Arese Mi info@kooeurope.com - tel 0039 02 93589495

Distribuito in Asia Pacific da Koo Asia Ltd. Rm 2113, Level 21, Landmark North 39 Lung Sum Avenue, Sheung Shui, N.T., Hong Kong. Tel: (852) 2110 4780 - Fax: (852) 2110 4783
